

 **miyo**<sup>®</sup> liquid ceramic



# Descrição do Produto



 **miyo**<sup>®</sup> liquid ceramic  
**PINK**

## Estética em camadas - trabalho monolítico

Atualmente são oferecidos dois kits entre eles MiYO para dentes e MiYO pink para gengiva. Ambos são únicos, compostos por pastas opalescentes e fluorescentes, feitas para caracterizar, dar textura ou estrutura e glazear.

Com o MiYO você pode obter resultados estéticos de maneira fácil e rápida comparando aos resultados estratificados, porém o esforço corresponde ao de uma maquiagem.

O sistema MiYO é composto de materiais e colorações imitando os sistemas clássicos de estratificação.

MiYO Color consiste em diferentes cores auto-glazeáveis com diferentes níveis de translucidez, cada um formulado exclusivamente para reproduzir as sutilezas da natureza.

Tais como translucidez incisal, mamélos, linhas de fissura, halos e gengiva.

Em cima de MiYO Color são aplicados os MiYO Structure.

Com o MiYO Structure é possível criar a profundidade, vitalidade e textura que são encontrados no esmalte e no tecido natural, com uma espessura entre 0,1mm - 0,2mm.

Devido à sua alta estabilidade, trabalhos individuais e caracterizações podem ser trabalhados facilmente com o pincel.

A baixa temperatura de queima não altera as características da superfície e assim com apenas 2 queimas consegue-se resultados estéticos e confiáveis.

### VANTAGENS MIYO:


- + Resultados confiáveis
- + Aplicação fácil
- + Econômico através de processos de aplicações rápidas
- + MiYO Color possui fluorescência e opacidade perfeitamente ajustadas para contraste e profundidade
- + MiYO Structure - pastas exclusivas de textura
- + Índice de refração natural do MiYO Structure, em coroas monolíticas já visível a partir de uma espessura de 0,1 mm
- + Alta estabilidade de cor
- + Baixa contração
- + Resultados sem surpresas controlando a forma, a superfície e a estrutura antes da queima

### O MIYO É COMPATÍVEL PARA:

- Zircônia monolítica
- Zircônia
- Cerâmicas em camadas de zircônia (InSync Zr)
- Dissilicato de lítio
- Camada de metal cerâmica (InSync MC)

### O MIYO PINK É COMPATÍVEL PARA:


- Zircônia monolítica
- Zircônia
- Cerâmicas em camadas de zircônia (InSync Zr)
- Dissilicato de lítio
- Camada de metal cerâmica (InSync MC)

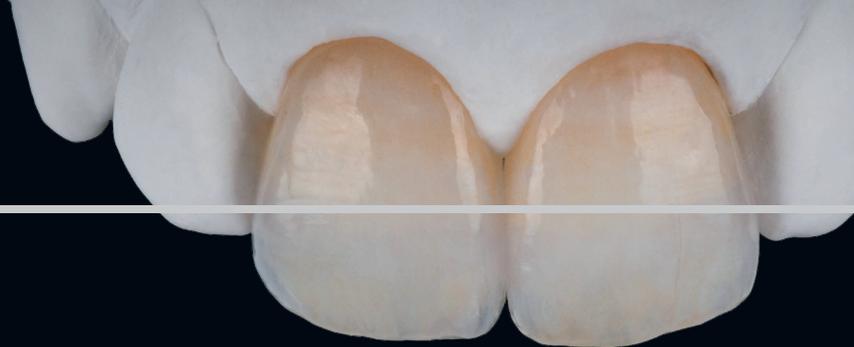

# 1 MiYO COLOR



A partir da mesma base, forma, cor e efeitos diferentes.

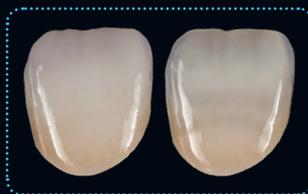

De alto para baixo valor com MiYO Color Storm e Smoke.



De A3 para A1 com MiYO Color Lumin.

# 2 MiYO STRUCTURE



Estruturando a superfície.

MiYO Structure antes da queima

MiYO Structure após a queima

miYO  
PINK



# 1 MiYO PINK COLOR




Possibilidades ilimitadas para uma caracterização detalhada.



Realização de tecido natural com MiYO pink Structure.

# 2 MiYO PINK STRUCTURE

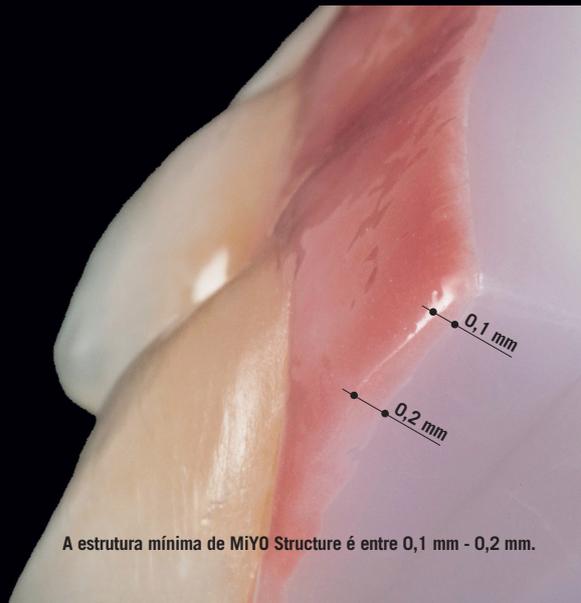

A estrutura mínima de MiYO Structure é entre 0,1 mm - 0,2 mm.



### COMPONENTES DO SISTEMA MIYO:

TRANSLUCENT	COLOR	STRUCTURE
 Trans Shade A	 Snow	 Structure Window
 Trans Shade B	 Linen	 Structure Ghost
 Trans Shade C	 Fissure	 Structure Enamel
 Trans Shade D	<b>MAMELON</b>	 Structure Ice
 Trans Straw	 Mamelon Wheat	 Structure Blush
 Trans Sage <b>NEW</b>	 Mamelon Coral	
 Trans Lotus	 Mamelon Pumpkin	 Pasta de glaze
 Trans Clementine	<b>HALO</b>	InSync Liquid - one for all -
 Trans Storm	 Halo Spring	
 Trans Cobalt <b>NEW</b>	 Halo Autumn	
 Trans Lumin		
 Trans Lumin plus <b>NEW</b>		
 Trans Smoke		
 Trans Slate <b>NEW</b>		

### COMPONENTES DO SISTEMA MIYO PINK:

TRANSLUCENT	COLOR	STRUCTURE
 Trans Raspberry	 Flamingo	 Structure Orchid
 Trans Copper	 Crimson	 Structure Rouge
 Trans Midnight	 Plum	 Structure Frost
	 Merlot	
	 Sorbet	 Pasta de glaze
	 Salmon	InSync Liquid - one for all -
	 Sable <b>NEW</b>	
	 Thistle <b>NEW</b>	

### DADOS TÉCNICOS

	CTE (25-500 °C) [10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> ]
MiYO Color	7,5 ± 0,5
MiYO Structure	7,4 ± 0,5
Pasta de glaze	7,3 ± 0,5



**biofisa** 

Distribuidor Exclusivo em Portugal

**Para mais informações:**

**+351 211 550 829 / geral@biofisa.co**

Rua Cidade de Bissau, 47 E Esc. 33.5 1800-075 Lisboa

Feito por:

Chemichl AG  
Landstrasse 114  
9490 Vaduz, Liechtenstein  
info@chemichl.com

 0124

GAN: 4000 | 1906



... more MiYO

